

Ca²⁺ -ATP 酶活性测定试剂盒

分光法 24 样

产品简介:

Ca²⁺ 是细胞内重要的信号分子，细胞质基质始终维持在一个较低水平的 Ca²⁺ 浓度，Ca²⁺ 浓度的维持主要由 Ca²⁺ -ATP 酶来维持，该酶可催化 ATP 水解生成 ADP 和无机磷。

通过测定无机磷的量来确定该酶活性高低。

试剂盒组成和配制:

试剂名称	规格	保存要求	备注
提取液	提取液 60mL×1 瓶	4°C保存	
试剂一	粉体 mg×1 瓶	4°C保存	用前甩几下使试剂落入底部，再加 8mL 提取液，混匀溶解备用。
试剂二	粉体×1 瓶	-20°C保存	用前甩几下使试剂落入底部，再加 15mL 提取液，混匀溶解备用。
试剂三	液体 4mL×1 瓶	4°C保存	
试剂四	A: 粉体 mg×1 瓶 B: 液体 3mL×1 瓶	4°C保存	临用前试剂 A 中加 2.9mL 的 B 液，再加 37.1mL 的蒸馏水，混匀溶解备用。
标准品	粉体 mg×1 支	4°C保存	若重新做标曲，则用到该试剂

[注]: 全程操作需无磷环境；试剂配置最好用新的枪头和玻璃移液器等，也可以用一次性塑料器皿，避免磷污染。

所需的仪器和用品:

可见分光光度计、1mL 玻璃比色皿 (光径 1cm)、水浴锅、台式离心机、可调式移液器、研钵、冰和蒸馏水。

Ca²⁺ + ATP 酶活性检测:

建议正式实验前选取 2 个样本做预测定, 了解本批样品情况, 熟悉实验流程, 避免实验样本和试剂浪费!

1、样本制备:

① 组织样本:

称取约 0.1g 组织, 加入 1mL 提取液, 进行冰浴匀浆。4°C×12000rpm 离心 10min, 取上清, 置冰上待测。

[注]: 若增加样本量, 可按照组织质量(g): 提取液体积(mL)为 1: 5~10 的比例进行提取。

② 细菌/细胞样本:

先收集细菌或细胞到离心管内, 离心后弃上清; 取约 500 万细菌或细胞加入 1mL 提取液, 超声波破碎细菌或细胞 (冰浴, 功率 200W, 超声 3s, 间隔 10s, 重复 30 次); 12000rpm 4°C离心 10min, 取上清, 置冰上待测。

[注]: 若增加样本量, 可按照细菌/细胞数量(10⁴): 提取液(mL)为 500~1000: 1 的比例进行提取。

③ 液体样本: 直接检测; 若浑浊, 离心后取上清检测。

2、上机检测:

① 可见分光光度计预热 30min 以上, 调节波长至 700nm, 蒸馏水调零。

② 所有试剂解冻至室温 (25°C)。

③ 在 EP 管中依次加入:

试剂名称 (μL)	测定管	对照管
-----------	-----	-----

试剂一	120	
提取液		200
样本	200	
试剂二	200	200
37℃ 孵育 20min		
试剂三	80	80
样本		200
混匀，12000rpm，4℃离心 5min，上清液待测。		


④ 显色反应：

上清液	150	150
试剂四	600	600
混匀，室温静置 3min，700nm 下读取各管吸光值， $\Delta A = A_{\text{测定}} - A_{\text{对照}}$ （每个样本做一个自身对照）。		

结果计算：

1、标准曲线方程：

$y = 0.8474x - 0.0164$, x 是标准品摩尔质量 ($\mu\text{mol/mL}$), y 是 ΔA 。

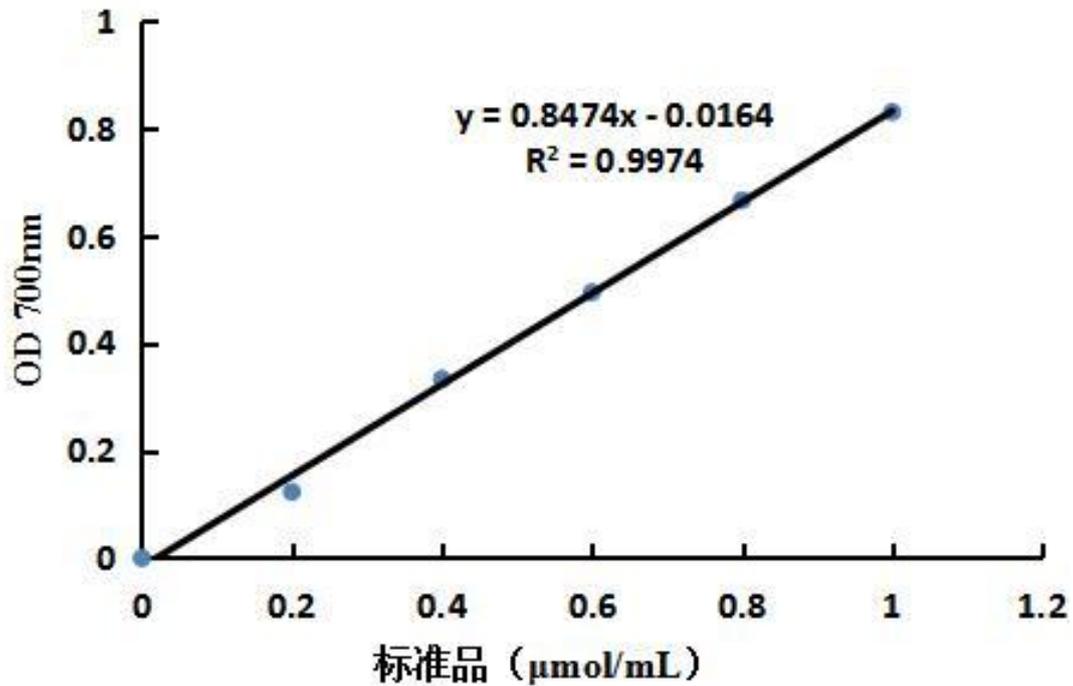

2、按蛋白浓度计算：

定义：每小时每毫克组织蛋白分解 ATP 产生 1μmol 无机磷的量为一个酶活力单位。

$$\text{酶活力}(\mu\text{mol/h/mg prot})=[(\Delta A+0.0164)\div 0.8474\times V2]\div(V1\times Cpr)\div T$$

$$=12.04\times(\Delta A+0.0164)\div Cpr$$

3、按样本鲜重计算：

定义：每小时每克组织分解 ATP 产生 1μmol 无机磷的量为一个酶活力单位。

$$\text{酶活力}(\mu\text{mol/h/g 鲜重})=[(\Delta A+0.0164)\div 0.8474\times V2]\div(W\times V1\div V)\div T$$

$$=12.04\times(\Delta A+0.0164)\div W$$

4、按细菌或细胞密度计算：

定义：每小时每 1 万个细菌或细胞分解 ATP 产生 1μmol 无机磷的量为一个酶活力单位。

$$\text{酶活力}(\mu\text{mol/h}/10^4\text{cell})=[(\Delta A+0.0164)\div 0.8474\times V2]\div(500\times V1\div V)\div T$$

$$=0.024\times(\Delta A+0.0164)$$

5、液体中 Ca^{2+} -ATPase 活力计算:

定义：每小时每毫升液体分解 ATP 产生 $1\mu\text{mol}$ 无机磷的量为一个酶活力单位。

酶活力($\mu\text{mol/h/mL}$)= $[(\Delta A+0.0164)\div 0.8474\times V2]\div V1\div T=12.04\times(\Delta A+0.0164)$

V---加入提取液体积, 1mL; V1---加入样本体积, 0.2mL ;

V2---酶促反应总体积, 0.68mL; T---反应时间, 1/3 小时;

W---样本鲜重, g; 500---细菌或细胞总数, 万;

Cpr---样本蛋白质浓度, mg/mL; 建议使用本公司的 BCA 蛋白含量检测试剂盒。

附：标准曲线制作过程：

- 1、制备标准品母液 ($5\mu\text{mol/mL}$)：标准品用 10mL 试剂一溶解。(母液需在两天内用)。
- 2、把母液稀释成六个浓度梯度的标准品：0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1. $\mu\text{mol/mL}$ 。也可根据实际样本来调整标准品浓度。
- 3、依据显色反应阶段测定管的加样体系操作，根据结果即可制作标准曲线。